



**SAUBERN**



**Ósmosis Inversa Standard** con  
**CARRITO DE PRETRATAMIENTO**

“Garantizamos soluciones que aumentan la calidad de la vida de los pacientes con insuficiencia renal”.



PRESENTE EN  
**TODO**  
BRASIL  
y Países de  
AMÉRICA LATINA



# ÓSMOSIS INVERSA STANDARD CON CARRITO DE PRETRATAMIENTO



## Operación en Presión Nula

Doble Bomba construidas en material inoxidable con capacidad de operar bajo presión nula.



## RESISTENTE

Estructura y Revestimiento externo en acero inoxidable  
Resistente al impacto y a la corrosión



## FÁCIL DE OPERAR

Agua tratada con apenas un toque.



## FÁCIL VISUALIZACIÓN

- Conductividad en la pantalla
- Manómetro de presión
- Alarmas visuales



Bivolt  
(127/220V)



**COMPACTA**  
Fácil de transportar



**RUEDAS DE FÁCIL MOVIMIENTO Y CON FRENSOS**

### ESPECIFICACIONES

Altura:	99,0 Cm	Voltaje:	Bivolt automatico (127/220V)
Ancho:	76 Cm	Potencia:	150 VA
Profundidad:	79,0 Cm	Producción de agua:	120 L/H (Ampliable según la necesidad del cliente)
Peso:	97 kg	Alarmas:	Conductividad alta   Falta de agua
Producto químico: Desinfección con ácido peracético   Lavado químico: Hidroxido de sodio y acido cítrico			



# SU AGUA TRATADA EN ETAPAS


FILTRO DE  
POLIPROPILENO



RETENCION DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN EL AGUA

1

FILTRO DE  
CARBÓN ACTIVADO

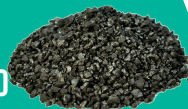

AUTONOMIA EN LA RETENCIÓN DEL CLORO  
Y MATERIA ORGÁNICA

2

ABLANDADOR



RETENCIÓN DE 100% DEL CALCIO Y  
MAGNESIO PRESENTE EN EL AGUA

3


FILTRO DE  
POLIPROPILENO



RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS  
REstantes EN EL AGUA

4

MEMBRANA DE  
ÓSMOSIS INVERSA

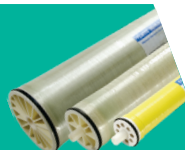

RETENCIÓN:  
>95% DE SALES DISUELTAS  
>99% BACTERIAS Y PIROGENICOS

5

FILTRO DE ENDOTOXINA



MEMBRANA DE POLISULFONA CON  
POROSIDAD DE 5 NANO PARA  
RETENCIÓN DE ENDOTOXINA.

6

## FILTRO CARBÓN ACTIVADO

El Carbón Activado absorbe todo el cloro y materia orgánica presente en el agua.



## FILTRO ABLANDADOR

La resina garantiza agua sin dureza, aumentando la vida útil de la membrana, garantizando la calidad del agua para la hemodiálisis.





## Opcional


Los dos tanques pueden ser utilizados como ablandador, eso permite mas horas de diálisis.



120L / H

\*AGUA PARA  
2 MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS  
SIMULTÁNEAMENTE

\*PUEDE HABER VARIACIÓN DE ACUERDO CON LA CALIDAD DEL AGUA.

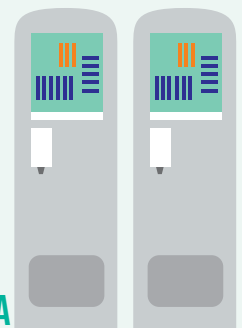



---

**SAUBERN MÉDICA**

Rua São José, 2717 - Área Urbanizada II  
CEP. 87307-799 - Campo Mourão - PR - Brasil

fone: +55 (44) 3529-1050  
saubern@saubern.com.br  
www.saubern.com.br